


BIOBASE[®]

Disinfection & Sterilization Solution

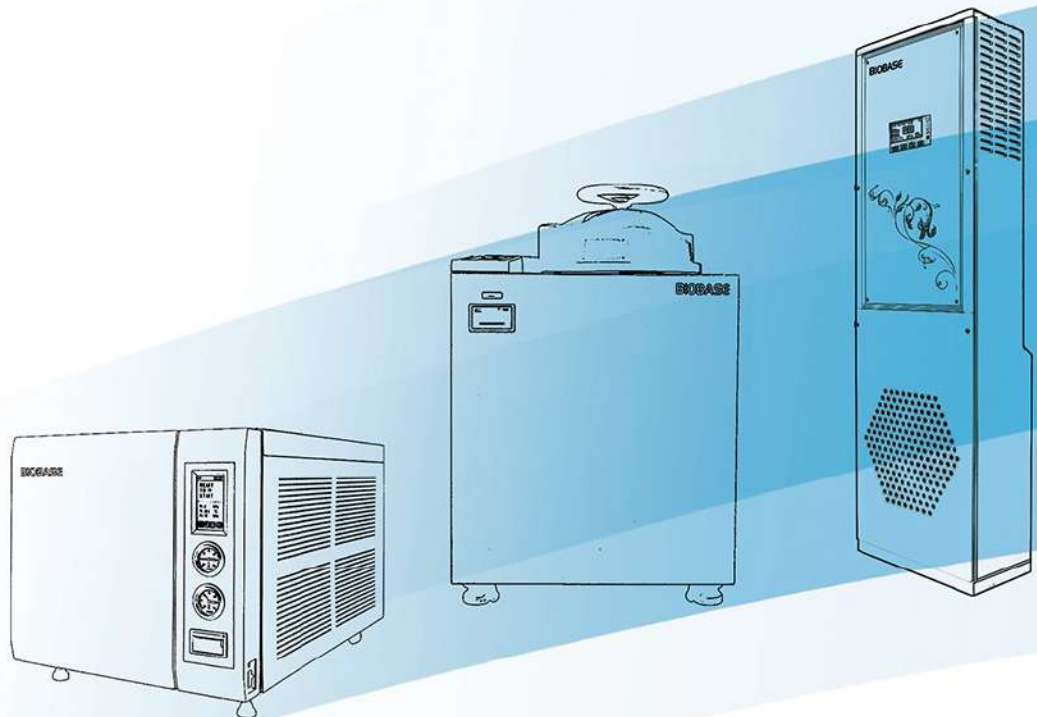

Version 2021

Autoclave de mesa Clase B III

BKM-Z III




El esterilizador de la serie BKM-BIII es un esterilizador de mesa de clase B. Como tipo de esterilizador de alta presión, toma el vapor como medio de esterilización que es rápido, seguro y económico. Son de uso común en el departamento de estomatología, departamento de oftalmología, quirófano y CSSD para realizar la esterilización de instrumentos envueltos o desenvueltos, telas, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.

Características:**Tanque de agua de tipo abierto incorporado de fácil limpieza**

- Monitor de calidad del agua
- Filtro de agua en el interior
- Sensor de nivel de agua
- Completamente inyectado puede soportar la ejecución repetida del programa.

**Interfaz de operación completamente nueva**

- La pantalla LCD puede mostrar la temperatura, la presión, la hora, el estado de funcionamiento, la información de error y alarma, etc.
- Es conveniente para los usuarios observar el estado de funcionamiento del esterilizador.

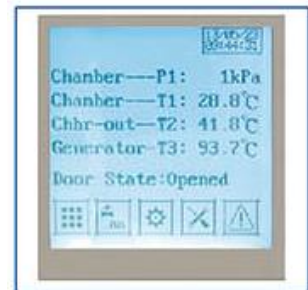**Dispositivo de protección de seguridad múltiple**

- Dispositivo de protección automático de sobre-temperatura, control múltiple y protección para generador de vapor, protección de enclavamiento de seguridad de puerta y protección de sobrepresión de doble cámara, dispositivo de seguridad de circuito electrónico.

Puerta automática

- La serie BKM-Z18 / 24 / 45BIII adopta una estructura de puerta automática, operación rápida y simple, que protege a los operadores de quemaduras.
- La serie BKM60 / 80BIII adopta la tecnología de prensado de varillaje síncrono multipunto, confiable y duradera.

Vacío eficaz

Sistema de vacío eficiente, bajo ruido de trabajo, el límite más bajo de vacío puede alcanzar más de -90KPa, vacío a alta velocidad, rendimiento de secado perfecto, esterilización completa.

Varios tipos de programas

Programas de esterilización: sin envolver, envuelto, ruber, usuario 01, N-quick, B-quick, programa de prueba de priones: BD & Helix, prueba de fugas.

Programa auxiliar: Precaentar, secar, lavar.

Generador de vapor de alta eficiencia

Los modelos BKM-Z18 / 24 / 45BIII utilizan un generador de vapor instantáneo incorporado.

El generador de los modelos BKM-60 / 80BIII produce vapor a alta velocidad y en grandes cantidades.

Otras características

Pulso de vacío, calentamiento, esterilización, agotamiento, secado al vacío totalmente automático.

La cámara se calienta mediante un calentador de película, lo que ahorra energía y tiempo.

Tipo de registro: impresora incorporada (Estándar)

Almacenamiento electrónico: disco flash USB (opcional)

BIOBASE®

Modelo	BKM - Z18B (III)	BKM - Z24B (III)	BKM - Z45B (III)	BKM-Z60B (III)	BKM-Z80B (III)
Capacidad	18 litros	24 litros	45 litros	60 litros	80 litros
Tamaño de la cámara (mm)	Φ250 * 350	Φ250 * 450	Φ316 * 618	Φ386 * 595	Φ386 * 717
Presión de diseño	-0,1 / 0,3 MPa				
Temp. De diseño	144 °C				
Temperatura. Abarcar	105 ~ 138 °C				
Material de la cámara	SUS304				
Bandeja de carga estándar	Tipo A		Tipo B		
Consumo	2,6 kilovatios		5,8 kilovatios	7,4 kilovatios	
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz		AC220V ± 10%, 50 / 60Hz		
Tamaño externo (W * D * H) mm	530 * 560 * 450	530 * 660 * 450	640 * 830 * 550	730 * 1002 * 560	730 * 1002 * 560
Tamaño del embalaje (W * D * H) mm	720 * 780 * 680	720 * 880 * 700	750 * 1015 * 730	830 * 1180 * 795	830 * 1180 * 795
Peso bruto (kg)	70	80	140	185	205



Autoclave de mesa Clase B III

Cámara interna en acero inoxidable SUS304



Bandeja de carga estándar



Type A



Type B



Type C
(Optional for
45/60/80L)

Autoclave de mesa Clase B III





This is to certify that the Quality Management System of

Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd.

Organization Code : 79889855-X

Operation Address : Biobase Biodustry Park, Crossing of Jingshi East Road and Mingbu Road, Mingshui Economic Development Zone, Zhangqiu, Jinan City, Shandong Province, China

Registered Address : Biobase Biodustry Park, Crossing of Jingshi East Road and Mingbu Road, Mingshui Economic Development Zone, Zhangqiu, Jinan City, Shandong Province, China

applicable to

R & D, production and sales of biological safety cabinet, QRJ series medical aerosol adsorber, BKQ series pressure steam sterilizer, BKM series table-top sterilizer, BKG series hot air sterilizer, BXC series refrigerator, BYC series medical refrigerator, BJPX series incubator, BIOBASE series freedom EVOlyzer, in vitro diagnostic kit(diagnostic kit for proteins, diagnostic kit for carbohydrate, diagnostic kit for enzyme, diagnostic kit for lipids, diagnostic kit for inorganic ions, diagnostic kit for autoantibodies, diagnostic kit for other physiological, biochemical, or immune function index) (within registration certificate)

has been assessed and registered by NQA against the provisions of

ISO 9001:2008

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by NQA.

The information of this certificate can be checked on CNCA's website (www.cnca.gov.cn)
SNQA's website : www.snqa.com.cn

Managing Director



015

Certificate Number **35953**

Date: 21 May 2012
Reissue Date: 21 May 2015
Valid Until: 21 May 2018
EAC Code: 19/13



About Us

Founded in 1999, having over 2000 employees (till August, 2018), BIOBASE Group is a new high-tech enterprise focusing on development, production and management of scientific equipment, In Vitro Diagnosis (IVD) instrument and reagent.

BIOBASE Group is specialized in products of 8 areas including medical diagnosis, biosafety protection, disinfection and sterilization solution, water purification system, infant care products, cold chain products, software products, clean room project.

We have full production line for table top steam sterilizer, vertical pressure steam sterilizer, portable pressure steam sterilizer, horizontal pressure steam sterilizer, hot air sterilizer, gas sterilizer, glass bead sterilizer, infrared sterilizer and automatic glassware washer. And every year we have many new products that come into the market.

BIOBASE Group has certificates including ISO9001, ISO13485, ISO14001, SGS, CE, etc for various products.

BIOBASE has set up branch offices in 24 provinces in China, and has also set up warehouses in the United States, India, UAE and Jordan. We now have long-term business partners in more than 130 countries.

BIOBASE Group always adheres to the mission of "service for health for the future" and promotes company's culture vigorously. Providing with high quality products and good service, BIOBASE would like to establish win-win business cooperation with distributors all over the world.



ISO9001



ISO13485



ISO14001



CE



Oficina central BIOBASE:

Dirección de la oficina: 6to piso, Edificio No. 2, 9 gangxing road,
High-tech Zone, Jinan, Shandong, China

Tel: + 86-531-81219803 / 01

Fax: + 86-531-81219804

Consultas: export@biobase.com

Quejas: + 86-531-81307671

customer_support@biobase.cc

Servicio posventa: service_sd@biobase.cc;

service_ivd@biobase.cc

Sitio web: www.biobase.cc / www.meihuatrade.com /

www.biobase.com

Facebook: BIOBASE CHINA

Twitter: BIOBASE CHINA

LinkedIn: BIOBASE CHINA

Dirección de la fábrica: No. 2717 First Industry Road, Mingshui

Economic Development Zone, Zhangqiu, Jinan, provincia de

Shandong, China

Distribuidor autorizado para Costa Rica



GOLTECH DE COSTA RICA S.A.
Céd. Jur. 3-101-770271
San José, Costa Rica
Tel. +506 8814-3557 / 8742-3650
Web: www.goltech.net