



ESTABLECIENDO EL
NIVEL DE CALIDAD

iFuge D06
(Centrifuga De Doctor)

iFuge D06

(Centrifuga De Doctor)

La calidad, para ser honesto, es bastante difícil de lograr. Requiere una cuidadosa amalgama de rendimiento, durabilidad y facilidad de uso, que desafortunadamente no se encuentra en todos los equipos. La reducción de costes e insatisfacción del cliente son bastante comunes en la industria con tal de aumentar los beneficios. Como resultado, cuando un cliente invierte en una máquina que cree que le facilitará el trabajo, termina decepcionado por su rendimiento poco fiable y por las frecuentes molestias de mantenimiento y sustitución de piezas críticas. El uso de componentes de baja calidad, especialmente el motor, crea un sinfín de problemas, incluyendo una potencia poco confiable y mediocre. Además, la falta de atención a los detalles da lugar a problemas importantes como el aumento de la temperatura dentro de la cámara, que puede afectar a muestras muy sensibles y arruinar todo el lote.

Por eso, el iFuge D06 de Neuation pasó mucho tiempo en la fase de desarrollo antes de que estuviera disponible para su compra. Construido con las mejores materias primas y técnicas perfeccionadas a lo largo de los años, iFuge D06 disfruta de una ventaja de fabricación que no se encuentra entre los dispositivos de la competencia. Ya sea el potente motor BLDC o la cámara inteligentemente diseñada que evita el aumento de la temperatura, cada aspecto de iFuge D06 está diseñado para crear la máxima satisfacción del usuario. El dispositivo también está diseñado para proteger contra las circunstancias más inciertas. iFuge D06 lleva la seguridad al siguiente nivel al incorporar varias funciones de seguridad para asegurar que usted permanezca seguro sin importar lo que suceda. Fiel a su promesa de establecer el nivel de calidad, iFuge D06 elevará su experiencia de uso y le dejará completamente satisfecho con su intuición y su facilidad de uso. Descubra el poder de un diseño bien pensado.



Características del producto



Puede acomodar tubos de 6/8 X 10/15 Ml.



Motor BLDC de larga duración y libre de mantenimiento



Microprocesador controlado para un rendimiento eficiente Incluso bajo altas cargas




Selección de velocidad: 500 - 6500 RPM (en pasos de 100 RPM)

Ajuste del temporizador de 0,5 a 30 minutos y Modo Infinito



Pantalla digital con ajuste de velocidad y tiempo

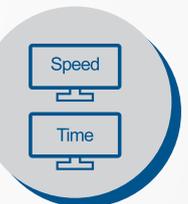

Seguridad del cierre de la tapa - La tapa se abre automáticamente al terminar el ciclo



Función de seguridad de detección de desequilibrios con corte automático y pantalla de error



Características del producto



Caja metálica de seguridad en la tapa



Rotores autoclavables



El diseño inteligente del flujo de aire asegura que el aumento de la temperatura de la cámara esté bajo control



La memoria de la última ejecución para mayor comodidad.

Los adaptadores pueden ser ajustados para adecuarse a todos los tubos de colección de tamaño estándar



Tamaño pequeño- Utiliza menos espacio físico



Dispositivo de bajo voltaje para mayor seguridad (24V) - Viene con una fuente de alimentación universal (95 - 230V 50/60 Hz)



Opciones del rotor



Ángulo fijo
6 x 15ml | 3684xg



Ángulo fijo
8 x 15ml | 3873xg

Especificaciones

Especificaciones	iFuge D06
Fixed Angle Rotor (Optional Rotors)	6x15 ml(Autoclavable) - 3684g
	8x15 ml(Autoclavable - 3873g
Max RPM	6500
Motor Type	Brushless DC
Speed Setting	500 to 6500 RPM
Timer Setting	1 to 30 mins & infinite mode
Lid Lock Safety	Yes
Noise Level	< 60 dB
Imbalance Detection	Yes
Dimensions (W x D x H)	260 x 244 x 205 mm
Weight	4 kg
Adaptors (included in standard pack)	Chosen rotor with (adaptors for 5, 7 ml & 1.5/2 ml tubes -takes most standard blood collection tubes)

Información de pedido

iFuge D06		
Product Name	Cat #	Details
iFuge D06	D06-2111 EU/US/UK/AU	Doctor Centrifuge 6500 RPM / 3684 x g for 6 (autoclavable) x 15 ml
iFuge D06	D06-3111 EU/US/UK/AU	Doctor Centrifuge 6500 RPM / 3873 x g for 8 (autoclavable) x 15 ml

Accessories		
Product Name	Cat #	Details
6 Tube SS Rotor set	D06-6A	Autoclavable 6 Tube Rotor set
8 Tube SS Rotor set	D06-8A	Autoclavable 8 Tube Rotor set
Reduction Adaptors	D06-RA	Reduction Adaptor (1 unit) x Quantity
Allen Key	D06-C	Allen Key for Rotor change
Power Adaptor	D06-F-EU/UK/US/AU	Power Adaptor with specific pin type
Power Cable	C-EU/UK/US/AU	Only Power cable with specific Pin type
Rotor Nut	D06-RN	Rotor Nut for rotor fixing
Tube Holder SS	D06-SSH	SS Tube holder (1 unit) x Quantity

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.