



NO PUEDE SER
MEJOR QUE ESTO

iSwix VT

Mezclador de Vórtice Digital

iSwix VT

Mezclador de Vórtice Digital

Los mezcladores de vórtice desempeñan un papel crucial en cualquier instalación de laboratorio, de ahí la necesidad de un rendimiento fiable y duradero, pero la mayoría de los mezcladores tienen problemas de rendimiento debido a la calidad inferior de los componentes y las materias primas utilizadas. Por lo tanto, estos dispositivos dejan mucho que desear y terminan siendo un desperdicio de espacio e inversión.

Desarrollado después de años de I+D, el mezclador vortex iSwix VT de Neuation, el mejor de su clase, proporciona el mejor rendimiento gracias a sus componentes internos de primera línea, como el motor BLDC de larga duración y sin mantenimiento. Con características líderes en su categoría, como el contrabalance incorporado y el interruptor de 3 vías, el dispositivo hace que el trabajo sea aún más fácil.



Características del producto



Diseño de cuerpo no corrosivo



Ajuste de configuración de velocidad de 300 a 4200 RPM



Diámetro orbital de 4 mm




La Pantall Digital cambia para mostrar la velocidad y el tiempo cada 5 segundos



Motor de Corriente Continua sin escobillas (BLDC) para una operación silenciosa y libre de mantenimiento.

Bucle de Control basado en un microprocesador para un rendimiento eficiente incluso bajo cargas elevadas

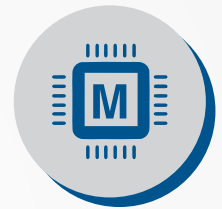

Configuración del temporizador de 1 a 999 minutos y Modo Continuo



Función de Modo de Pulso con la función "Ciclo-Pausa-Cicló" para una mezcla completa de la solución



Interruptor de 3 vías para usarlo de modo: Táctil, Continuo y Espera, para una comodidad incomparable




Características del producto



El contrapeso incorporado asegura una operación estable y sin preocupaciones.

El grado de protección IP 42 garantiza la durabilidad y calidad del producto.

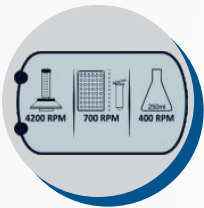

Con Marcador visual para una velocidad máxima. Con accesorios

Dispositivo seguro de bajo voltaje



El diseño compacto ahorra un valioso espacio y también puede ser utilizado dentro de las campanas de gases y cámaras frigoríficas



Accesorio estándar



Disco redondo




Accesorio de recipiente



Accesorios opcionales



Tubo de microcentrifuga
20 x 1.5/2ml

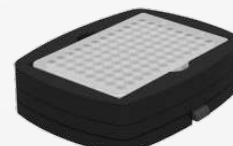

Microplaca de
96 pocillos



Matraz


Especificaciones

iSwix VT	
Max Speed	4200 RPM
Orbital diameter	4 mm
Motor type	Brushless DC
Digital Display	Yes
Dimensions (W X D X H)	205 x 136 x 138.5 mm
Speed Setting	300-4200 RPM
Timer Setting	0-999 mins (min/sec display)
Pulse mode	Yes, Programmable Pulse ✓
Max Load Capacity	500 gm
Weight	2.8 kg
Optional Attachments (not included)	Universal platform for attaching either - microplate / microtube / flask Attachments ✓


Información de pedido

iSwix VT		
Product Name	Cat #	Details
iSwix VT	VM-2110 EU/US/UK/AU	Digital Vortex Mixer
Attachment	VM-A6	Round Disc Attachment


Accessories




Microplate
CAT. NO. # VM-A3

 ✓

Flask
CAT. NO. # VM-A4

 ✓

Micro Centrifuge Tubes
CAT. NO. # VM-A2

 ✓

Cup Attachment
CAT. NO. # VM-A1

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.