



SKR058-ET

CARRO DE EMERGENCIA



SAIKANG / Medical


Healthier
your life

SKR058-ET

CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES

Material

El material ABS es un innovador plástico de ingeniería. Antibacteriano, a prueba de humedad, anticorrosión, resistente al desgaste, no tóxico e insípido, nunca se oxida. Lavable y fácil de limpiar.

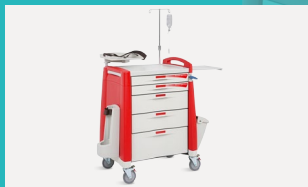

Diseño

El diseño y la producción en general son exquisitos, el estilo y la combinación de colores son razonables, la instalación es simple y la estructura es estable y duradera.



Cajón

El diseño del cajón de siete capas con pequeños compartimentos en el medio puede acomodar múltiples tipos de artículos, con una clasificación poderosa y un acceso fácil y conveniente a los artículos.



Compartimento del cajón

El interior del cajón está equipado con rejillas de medicamentos clasificados de acrílico transparente, que se pueden utilizar para clasificar y colocar medicamentos de primeros auxilios. Las rejillas de medicamentos se pueden combinar libremente.

Parámetros técnicos

▪ Dimensiones totales	790 A x 610 P x 1000 A mm
▪ Soporte para desfibrilador	380 x 340 mm
▪ Tablero de Trabajo	340 x 250 mm
▪ Tablero de RCP	475 x 595 x 8.5 mm
▪ Peso del Producto	65 Kg
▪ Ruedas	5 "dos ruedas con freno, dos sin freno

Configuración técnica

<input checked="" type="checkbox"/> Bote de basura de 20 l con tapa
<input checked="" type="checkbox"/> Estante para botellas de oxígeno
<input checked="" type="checkbox"/> Soporte iv ajustable
<input checked="" type="checkbox"/> Rejilla para medicamentos horizontal y vertical
<input checked="" type="checkbox"/> Riel deslizante

Accessories


Porta Suero

Soporte de suero de aleación de aluminio ajustable.




Ruedas

En la parte inferior, utiliza dos frenos silenciosos de 5 pulgadas, ruedas silenciosas anti-bobinado de alta gama, lo que permite un movimiento flexible y una alta capacidad de carga.

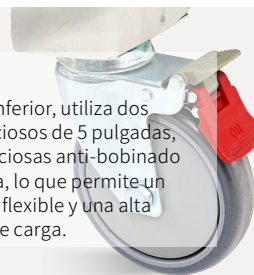

Diapositiva del cajón

El cajón utiliza correderas de amortiguación silenciosa de tres secciones de alta resistencia. Cuando el cajón se cierra a la distancia final, la presión hidráulica ralentiza la velocidad y reduce la fuerza de impacto, creando un efecto de cierre cómodo.

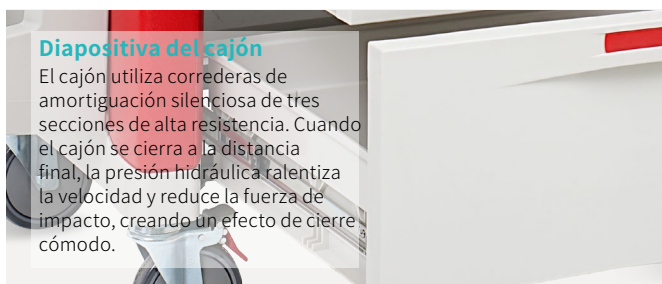

Mesa de trabajo

El carro está equipado con una mesa de trabajo plegable, que se puede utilizar para escribir;

Tamaño de la mesa de trabajo: 340*250 mm;



Mango sellado

El carro está equipado con un asa sellada, que puede bloquear cinco cajones al mismo tiempo.



Portabotellas de oxígeno

Soporte de botella de oxígeno ABS en el lado izquierdo.



Bote de basura

Cubo de basura de ABS tipo concha en el lado derecho, Especificación: 20L



Tablero de RCP

La placa ABS CPR está instalada en la parte posterior del cuerpo del carro, que se puede utilizar durante el rescate de desfibrilación.

Tamaño de la placa de RCP: 475*595*8,5mm





INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



SUCURSALES EN EL MUNDO

EE.UU.

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

África Oriental

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

Sucursal del sudeste asiático

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

Reino Unido

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 2021111106

Rusia

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Oriente Medio

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 📞 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



Catálogo general