



X9x

Cama eléctrica multifuncional

Código de registro: SKD-C



SAIKANG Medical

Más

saludable tu vida

Hoja de datos del producto

X9x


Características
y destacados

Parámetros técnicos

• Tamaño externo (LxW):	(2040-2240)x1020 mm
• Plataforma del colchón:	(1820-2020)x820mm
• Carga de trabajo segura:	250 kilos
• Ajuste de altura:	500-950 milímetros
• Ajuste del respaldo:	0-75° (±10°)
• Ajuste del apoyo para las rodillas:	0-20° (±10°)
• Trendelenburg inverso:	0-18°
• Trendelenburg:	0-18°
• Indicador de ángulo:	0-90°
• Tensión y frecuencia:	100-240 V · 50/60 Hz
• Enchufe según sea necesario (grado hospitalario)	

Configuración técnica

Motor lineal LINAK	6 piezas
Ruedas laterales dobles de 6", bloqueo centralizado	4 piezas
Riel lateral de ABS con panel de control integrado	1 juego
Extremos de la cama de ABS extraíbles en un paso	1 juego
Rueda de parachoques de pared de Ø75 mm	4 piezas
Portasuelos	1 juego
Previsión del portasuelos	4 piezas
Gancho de drenaje	4 piezas
Pedal de rueda 5ta direccional	2 piezas
Pedal de bloqueo central	2 piezas
Plataforma de colchón translúcida de rayos X	1 juego
Batería de respaldo	1 juego
Luz nocturna	1 juego
Manija de empuje de la cama para traslado de emergencia	1 juego
RCP manual	
RCP eléctrica	

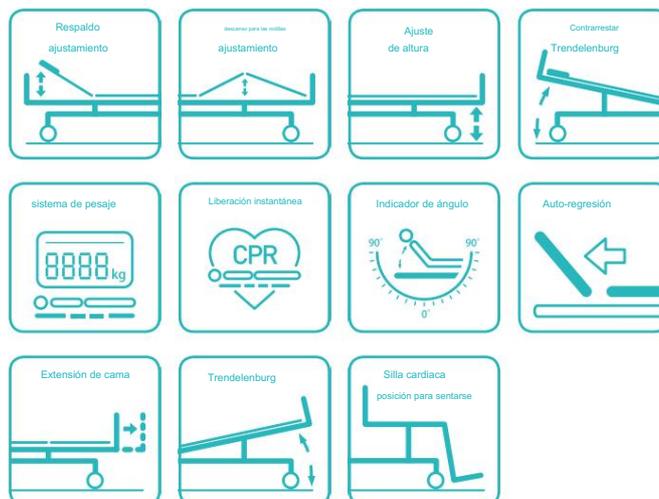

Opcional

Sistema de pesaje con pantalla LCD

Sistema de almacenamiento de datos

Mono poste

Diseño

El reposapiés de cabecera extra largo y alto, con diseño rodeado de curvas, brinda una sensación de comodidad a los pacientes.

**Aceros | Cuadro**

Baosteel de Fortune Global 500.

11 Proceso de pintura epoxi, prueba ASTM antibacterial, espesor de pintura 0,12 mm, brillo 60°, la pintura puede resistir un impacto de 50 kg.

**Soldadura | Seguridad**

Panasonic Robotic garantiza una soldadura totalmente suave en 360°.

Estándar de seguridad IEC606011.

**El plástico**

El plástico ambiental se puede esterilizar a 100 °C y se puede tensar hasta 30 MPa.

**Motor eléctrico**

Motor lineal, con UL/ROHS/EN estándar. Ruido inferior a 50 dB, con una vida útil de 20.000 veces el movimiento.

**Pantalla táctil de 7 pulgadas**

Reemplazo de la pantalla del botón original, operación más conveniente. Hay dos opciones de idioma, chino e inglés.

La pantalla puede almacenar información del paciente y del médico, manuales de usuario y registros de peso.

**Freno**

El resorte de ruptura se mantiene calificado después de 10,000 veces de descanso ininterrumpido.

**Ruedas**

El neumático TPR no se desgasta después de correr 30 km, excepto la cubierta dura anti-bobinado, unida formando sin tornillos. Pasar la prueba dinámica: soportar 120 kg, correr 30 km y superar obstáculos 500 veces.

**Superficie de la cama**

Plataforma de colchón translúcida de rayos X.

**Carril lateral**

Barandilla lateral plegable con tope
Controlador incorporado e indicador de ángulo.

**Extremos de cama de ABS**

Los extremos de la cama de ABS One Step Removibles cumplen con los requisitos de primeros auxilios de las salas de alta gama y las salas de UCI.

**Ruedas de parachoques**

Rueda de parachoques 74 mm, máx.
Proteger la cama y al paciente durante el transporte.

**Batería**

Batería: movimiento de 18 veces con rodamiento de 100 kg, movimiento de 130 veces sin rodamiento.

**portasueros**

Columna de acero inoxidable con gancho de plástico.

**Parte**

inferior El estante en la parte inferior de la cama puede contener artículos del paciente, como zapatos y otros artículos.

**poste de elevación**

Poste de elevación: soporta una fuerza de 765 N.





Innovación
constante



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio



Sucursales en
todo el mundo

EE.UU

Tecnología médica Saikang, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
Ciudad de Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

Reino Unido Healthward International Ltd.
Departamento 111, 196 High Road
Wood Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Rusia LLC
Truda 174,
454080 Cheliábinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

este de Africa

Saikang Soluciones Médicas Ltd.
Unidad 3 del complejo Viraj, Mombasa
Road, PO Box 14262-00800, Nairobi,
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Suministros médicos Saikang LLC
X22-S03 Clúster de Inglaterra,
Ciudad Internacional, Dubái,
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Equipo médico Co., Ltd. de Jiangu Saikang
Código de existencias: 870098

 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
 +86 18021231901 · 
 ventas@chinasaikang.com
 www.saikangmedical.com



Video de empresa



catalogo general